

Перикан, Перификс

Изделия для эпидуральной анестезии

Эпидуральные иглы Перикан

Высокое качество шлифовки среза обеспечивает постоянный тактильный контроль при выполнении пункции.

- Оригинальный изгиб и срез Туюхи: высокая чувствительность и четкая дифференциация тканей
- Полированная внутренняя кромка среза: снижение риска срезания катетера
- Превосходная продольная стабильность — полный контроль продвижения иглы
- Весь спектр размеров игл для любых процедур во взрослой и детской практике



Полированная внутренняя кромка среза иглы снижает риск повреждения катетера при его установке



Установленный на катетер направитель плотно фиксируется в павильоне иглы и облегчает продвижение катетера



Масштаб 1:1

Перификс ONE 1

Перификс стандарт с закрытым кончиком и тремя боковыми отверстиями 2

Перификс Софт Тип с эластичным закрытым кончиком и тремя боковыми отверстиями 3

Масштаб 20:1

Перификс

Наиболее полный спектр эпидуральных катетеров

Перификс ONE — катетер №1

Двухслойная структура обеспечивает катетеру сочетание продольной устойчивости и мягкости.

Атравматичный конусовидный кончик предупреждает случайную перфорацию твердой мозговой оболочки, риск возникновения парестезий и повреждения сосудов.

Три пары микроотверстий равномерно распределяют анестетик, повышая качество блока.

Три встроенные Rg-полоски придают катетеру желтый цвет, который позволяет легко отличить эпидуральный катетер от инфузионных линий.

Катетеры Перификс стандарт и Софт Тип

- Высокая продольная устойчивость при сохранении гибкости, достаточной для простоты установки и извлечения
- Хорошая визуализация жидкостей кристально прозрачной трубке

Катетер Перификс Софт Тип

В дополнение к перечисленному выше:

- Гибкий и атравматичный мягкий кончик
- Снижение риска осложнений

Высочайшая гибкость и прочность на излом катетеров Перификс значительно снижает риск окклюзии



Перификс LOR

Шприц «потери сопротивления»

- Легкий ход поршня благодаря низкому коэффициенту трения
- Параболическая градуировка четко идентифицирует Перификс LOR и исключает ошибку при выборе шприца
- Не содержит латекс

Перификс LOR,
шприц для методики
«потери сопротивления»



Перификс ПинПэд

Фиксатор антибактериального фильтра

- Надежная фиксация на коже за счет вспененного адгезивного материала
- Подвижный язычок для легкой замены фиксатора
- Крепление фильтра с возможностью вращения на 360 градусов



ПинПэд адгезивный фиксатор фильтра

Перификс

Коннектор катетера

- Быстрое, безопасное и надежное крепление катетера
- Простая и эргономичная конструкция
- Четкий функциональный ответ — «щелчок, и готово»
- Доступен в двух вариантах: прозрачный для катетеров 19 G и желтый для катетеров 20 G и 24 G.



Перификс коннектор
катетера

Перификс

Антибактериальный фильтр

- Высокая (до 7 Бар) устойчивость к избыточному давлению
- Минимальный остаточный объем
- Комфорт пациента и гигиеничность



Перификс плоский антибактериальный фильтр

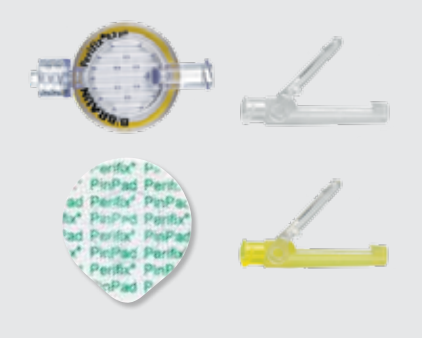
Ассортимент

Эпидуральные иглы	Размер	Длина, мм	Ø иглы, мм	Длина, дюймы	Шт. в уп.	Артикул
	Перикан — игла со срезом Туюхи					
	18 G	80	1,30	3¼	25	4512383 ✓
	18 G	150	1,30	6	25	4512200
	17 G	80	1,50	3¼	25	4512588
	16 G	80	1,70	3¼	25	4512782 ✓

Педиатрические иглы	Размер	Длина, мм	Ø иглы, мм	Длина, дюймы	Крылья	Шт. в уп.	Артикул
	Перикан Пед — игла со срезом Туюхи						
	22 G	50	0,73	2		25	4502078
	20 G	50	0,90	2	•	25	4502094
	18 G	50	1,30	2	•	25	4502302
	Эпикан Пед — игла для каудальной анестезии						
	25 G	30	0,53	1⅛		25	4502400
	22 G	35	0,73	1⅜		25	4502418
	20 G	50	0,90	2		25	4502426

Эпидуральный катетер с коннектором	Внутр. Ø × нар. Ø × длина, мм (размер, G)	Совместим с иглой Перикан, Ø G/мм	Шт. в уп.	Артикул
	Перификс стандартный катетер с тремя боковыми отверстиями			
	0,45 × 0,85 × 1000 (20 G)	18 G/1,30 мм	25	4513150
	Перификс ONE катетер с шестью боковыми отверстиями			
	0,45 × 0,85 × 1000 (20 G)	18 G/1,30 мм	25	4513150C

✓ Наиболее востребованные виды продукции

Перификс. Вспомогательные устройства для безопасного использования	Описание	Шт. в уп.	Артикул
	☐ Перификс коннектор катетера (19 G)	50	4513801
	☒ Перификс коннектор катетера (20/24 G)	50	4513800
	Перификс плоский антибактериальный фильтр 0,2 мкм	25	4515501
	Перификс ПинПэд фиксатор фильтра	25	4515510
Перификс LOR шприцы	Описание	Шт. в уп.	Артикул
	Перификс LOR шприц «потери сопротивления», 8 мл, Люэр	25	4637100
	Перификс LOR шприц «потери сопротивления», 8 мл, Люэр Лок	25	4638107